

beurer
beauty

Долгосрочная
ЭПИЛЯЦИЯ

HL100

SensEpil
by beurer



инструкция по применению



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Германия
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Эл. адрес: kd@beurer.de



SensEpil™ by beurer производства компании BEURER представляет собой мощный электрический прибор, поэтому при его использовании необходимо принимать меры предосторожности.



Держите прибор подальше от глаз!



Не используйте прибор SensEpil™ by beurer для обработки загорелой кожи или сразу после пребывания на солнце! Это может привести к серьезным ожогам и повреждению кожи.

Под вопросом!



Не используйте прибор SensEpil™ by beurer, если у Вас естественный темный цвет кожи!



Перед использованием прибора SensEpil™ by beurer прочтите все предупреждающие указания и инструкции по обеспечению безопасности и точно соблюдайте их при его использовании!

Пожалуйста, учтите следующее: Прибор SensEpil™ by beurer неэффективен при светлых или седых волосах.

Для лучших результатов составьте план эпиляции с использованием прибора SensEpil™ by beurer!

Стандартный план эпиляции в течение целого цикла развития волос:

- Первые 3–4 сеанса эпиляции с применением SensEpil™ by beurer проводятся с интервалом в 2 недели.
- Следующие 5–7 сеансов эпиляции с применением SensEpil™ by beurer должны проводиться с интервалом в 4 недели.
- После этого используйте прибор SensEpil™ by beurer время от времени при необходимости, пока не будет достигнут долговременный результат.

Неактивные волосяные фолликулы могут снова стать активными вследствие гормональных или других физиологических изменений. Поэтому в последующем время от времени может требоваться дополнительная обработка.

Содержание

1. Что представляет из себя прибор SensEpil™ by beurer?	4
1.1 Описание электроприбора SensEpil™ by beurer	4
1.2 Что входит в комплект	4
1.3. Вставной блок однонаправленного света	4
2. Назначение прибора SensEpil™ by beurer	5
2.1. Назначение прибора SensEpil™ by beurer	5
3. Безопасность при использовании прибора SensEpil™ by beurer	5
4. Противопоказания	6
5. Когда не следует пользоваться прибором SensEpil™ by beurer	7
6. Меры предосторожности – как безопасно использовать прибор SensEpil™ by beurer?	8
7. Снижение опасности травмирования	9
8. Возможные побочные явления при использовании прибора SensEpil™ by beurer	10
9. Метод долговременного удаления волос с использованием прибора SensEpil™ by beurer	11
9.1 Каким образом свет удаляет волосы	12
9.2 Как цикл развития волоса влияет на метод световой эпиляции	12
9.3 Составление плана эпиляции с помощью прибора SensEpil™ by beurer для получения наилучшего результата	12
10. Начало работы с прибором SensEpil™ by beurer (производитель beurer)	13
10.1 Устройство прибора SensEpil™ by beurer	13
10.2 Первая обработка прибором SensEpil™ by beurer.....	13
10.3 Результаты обработки прибором SensEpil™ by beurer	15
10.4 После обработки прибором SensEpil™ by beurer.....	16
11 Обслуживание прибора SensEpil™ by beurer (производитель beurer)	16
11.1 Очистка прибора SensEpil™ by beurer	16
11.2 Замена светового вставного блока	17
12. Устранение неисправностей	17
12.1 «Мой прибор SensEpil™ by beurer не включается»	17
12.2 «Когда я нажимаю на кнопку отправки импульса, световой импульс не отправляется».....	17
13. Часто задаваемые вопросы	18
14. Технические характеристики	21
15. Гарантия	22
Краткое руководство	23

Перед первым применением прибора SensEpil™ by beurer внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.

Обратите особое внимание разделам, в которых рассказывается о порядке работы с прибором во время и после процедуры, а также о начале работы с ним.



Мы рекомендуем Вам просматривать это руководство пользователя перед каждым сеансом эпиляции с помощью прибора SensEpil™ by beurer.

1. Перед началом работы

Прибор SensEpil™ by beurer – это электроприбор для долговременного удаления волос, основанный на принципе светового импульса и предназначенный для использования в домашних условиях.

1.1. Описание прибора SensEpil™ by beurer

Прибор SensEpil™ by beurer состоит из ОСНОВНОГО БЛОКА с ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ, АППЛИКАТОРА и ВСТАВНОГО БЛОКА ОДНОНАПРАВЛЕННОГО СВЕТА. На аппликаторе прибора SensEpil™ by beurer находится КНОПКА ПОДАЧИ ИМПУЛЬСА. ВСТАВНОЙ БЛОК ОДНОНАПРАВЛЕННОГО СВЕТА находится на ГОЛОВКЕ АППЛИКАТОРА.

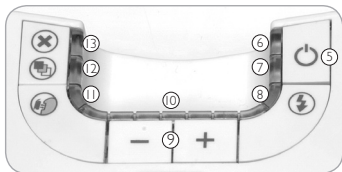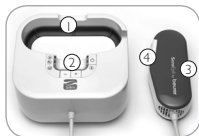

- | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| ① Основной блок | ⑤ Сетевой переключатель Вкл./Готов к работе | ⑧ Регулирующий переключатель уровня мощности | ⑬ Индикатор готовности системы |
| ② Панель управления | ⑥ Индикатор готовности к работе | ⑨ Индикатор уровня мощности | ⑭ Кнопка отправки импульса |
| ③ Аппликатор | ⑦ Индикатор работы | ⑩ Замена вставного блока однонаправленного света | ⑮ Индикатор однонаправленного света |
| ④ Вставной блок однонаправленного света | ⑧ Индикатор готовности к работе | ⑫ Индикатор типа кожи | ⑯ Головка аппликатора |

1.2. Комплектация

В комплект упаковки прибора SensEpil™ by beurer входят следующие принадлежности:

- прибор SensEpil™ by beurer основной блок и аппликатор
- кабель переменного тока
- данное руководство пользователя
- диск DVD с руководством по применению

1.3. Вставной блок однонаправленного света

Один *вставной блок однонаправленного света* прибора SensEpil™ by beurer может производить 750 световых импульсов (независимо от уровня мощности импульсов). Для человека средних размеров 750 импульсов хватает для одного сеанса обработки 2 ног, 2 рук, подмышечных впадин и зоны бикини, или для 2 сеансов обработки 2 ног и 2 подмышечных впадин, или для 10 сеансов обработки 2 подмышечных впадин и зоны бикини. Это полностью зависит от обрабатываемых участков тела. В течение первого года использования прибора SensEpil™ by beurer Вам потребуется от 1 до 7 *ставных блоков однонаправленного света*.

2. Назначение прибора SensEpil™ by beurer

2.1. Назначение прибора SensEpil™ by beurer

Прибор SensEpil™ by beurer предназначен для удаления нежелательных волос.

Прибор SensEpil™ by beurer предназначен для обработки подмышечных впадин, рук, ног и зоны бикини.

3. Безопасность с прибором SensEpil™ by beurer

Прибор SensEpil™ by beurer в первую очередь заботится о Вашей безопасности

- Технология HPL™, применяемая в приборе SensEpil™ by beurer, обеспечивает высокую степень безопасности при низком энергопотреблении

Технология Home Pulsed Light™ обеспечивает удаление волос на длительный срок при чрезвычайно низком уровне мощности, в отличие от других устройств световой эпиляции. Малая энергия, расходуемая прибором SensEpil™ by beurer, уменьшает потенциал, связанные с ним повреждения или осложнения и обеспечивает общую безопасность.

- SensEpil™ by beurer защищает Вашу кожу

Световая эпиляция не подходит для темной или загорелой кожи. В приборе SensEpil™ by beurer имеется датчик типа кожи, который распознает пигментацию кожи на обрабатываемой поверхности, поэтому обработка возможна только при приемлемой пигментации. Это уникальное защитное приспособление не допускает обработку темной или загорелой кожи.

Помимо этого, в приборе имеется *оптическая линза* размером 2 x 3 см², через которую проходит световой импульс, направляемый из *вставного блока однонаправленного света* к *головке аппликатора*. Это позволяет прибору SensEpil™ by beurer защищать Вашу кожу, так как нет непосредственного соприкосновения *оптической линзы* с кожей.

- SensEpil™ by beurer защищает Ваши глаза

Аппликатор прибора SensEpil™ by beurer имеет встроенное приспособление для защиты глаз. Он предназначен для того, чтобы предотвратить отправку светового импульса, когда *аппликатор* направлен в свободное пространство. Безопасный выключатель включается только тогда, когда кончик *аппликатора* находится в полном контакте с поверхностью кожи.

4. Противопоказания

Важная информация по безопасности – прочтите перед применением!

Прибор SensEpi™ by beurer подходит не всем. Перед применением внимательно прочтите информацию следующего раздела.

Если Вы не уверены, можете ли Вы использовать прибор SensEpi™ by beurer, проконсультируйтесь со своим врачом или дерматологом!

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор SensEpi™ by beurer, если у Вас естественный темный цвет кожи!

Обработка темной кожи прибором SensEpi™ by beurer может вызвать негативные последствия, такие как ожоги, зуд и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация).

Уникальный датчик типа кожи прибора SensEpi™ by beurer при начале каждого сеанса определяет тип кожи, предназначенной для обработки, а также проводит измерения после сеанса. Датчик типа кожи следит за тем, чтобы импульс направлялся только на пригодный для обработки тип кожи.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор SensEpi™ by beurer, если у вас естественный темный цвет кожи!
Он не будет работать!
Ознакомьтесь с таблицей цветов кожи внутри упаковки.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор SensEpi™ by beurer на загорелой коже или вскоре после пребывания на солнце!

Загорелая кожа содержит большое количество пигмента меланин, особенно сразу после пребывания на солнце. Это относится ко всем типам и пигментациям кожи, в том числе тем, которым требуется долгое время для образования загара. Наличие большого количества меланина кожа подвергается высокому риску при использовании прибора SensEpi™ by beurer.

Обработка темной кожи прибором SensEpi™ by beurer может вызвать негативные последствия, такие как ожоги, зуд и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация).



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор SensEpi™ by beurer на загорелой коже или вскоре после пребывания на солнце!
Это может привести к серьезным ожогам и повреждению кожи. Избегайте нахождения на солнце в течение 4 недель перед обработкой прибором SensEpi™ by beurer!

Попадание светового импульса в глаза может привести к серьезному повреждению глаз.



Держите прибор подальше от глаз!

- Пожалуйста, учтите следующее: Прибор SensEpil™ by beurer неэффективен при светлых волосах.

Прибор SensEpil™ by beurer не предназначен для удаления натуральных светлых, седых или рыжих волос. Если Ваши волосы имеют такой цвет, то прибор SensEpil™ by beurer Вам не подходит.

5. Когда не следует пользоваться прибором SensEpil™ by beurer

Определенные условия могут временно препятствовать применению прибора SensEpil™ by beurer. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор SensEpil™ by beurer в следующих случаях:

- Если Вы беременны или кормите грудью.
- Если Вы находились на сильном солнце или посещали солярий в течение последних 28 дней.
- В случае наличия на обрабатываемой поверхности татуировки или перманентного макияжа.
- В случае наличия на обрабатываемой поверхности темно-коричневых или черных пятен, например больших веснушек, родимых пятен, пигментных пятен или бородавок.
- В случае наличия на обрабатываемой поверхности кожной сыпи, псориаза, различных поражений кожи, открытых ран или активных инфекций, например герпеса. Перед применением прибора SensEpil™ by beurer на таких участках подождите до полного выздоровления кожи.
- Если ранее у Вас наблюдалось образование рубцовых язв, вы имеете повышенную чувствительность к свету (фоточувствительность), либо Вы принимаете лекарственные препараты, повышающие чувствительность кожи к свету, включая не стероидные, противовоспалительные вещества (например аспирин, ибупрофен, парацетамол), тетрациклин, фенотиазин, тиазидные диуретики, диуретики, Sulfonyluraes, сульфаниламиды, DTIC, флуороурацил, винбластин, гризеофульвин, альфа-гидроксильные кислоты (AHA), бета-гидроксильные кислоты (BHA), ретин-А®, аккутан® и/или топические ретиноиды.
- В случае различных болезненных состояний кожи, например при диабете, других общих заболеваниях или нарушении обмена веществ.
- Если в течение последних 6 месяцев Вы принимали аккутан® (Isotretinoin).
- Если в течение последних 3 месяцев Вы проходили лечение стероидными препаратами.
- Если на данном участке кожи у Вас наблюдался герпес и Вы не обратились к врачу и не провели необходимое лечение перед применением прибора SensEpil™ by beurer.
- Если Вы страдаете эпилепсией.
- Если у Вас имеется активный имплантат, например электростимулятор сердца, прибор для терапии недержания, инсулиновый насос и т. д.
- Если вы имеете заболевание, связанное со светочувствительностью, например полиморфный светодерматоз, крапивная лихорадка, волчанка и т. д.
- Если Вы болели раком кожи или у Вас имеются участки кожи с потенциально возможной злокачественной опухолью.
- Если в течение последних 3 месяцев Вы проходили лечение лучевой или химиотерапией.
- Если у Вас имеются любые другие заболевания, которые, согласно мнению Вашего врача, могут являться противопоказанием для использования данного прибора.

Если Вы не уверены, можете ли Вы использовать прибор SensEpil™ by beurer, проконсультируйтесь со своим врачом или дерматологом!

6. Меры предосторожности – как безопасно использовать прибор SensEpi™ by beurer?

■ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при выборе уровня мощности!

Мощность электрического тока влияет на силу направляемого на кожу светового импульса – от малого уровня (-) до высокого (+). Индикаторные лампочки на панели управления информируют, на какой уровень мощности установлен прибор. При высоком уровне мощности результаты использования прибора SensEpi™ by beurer повышаются, однако повышается и риск побочных явлений (см. раздел «Возможные побочные явления»).

При начале использования прибора SensEpi™ by beurer всегда выбирайте самый низкий уровень мощности (индикация «-»)! Если Вы не ощущаете или почти не ощущаете боли при использовании прибора SensEpi™ by beurer на самом низком уровне мощности, то при следующей обработке Вы можете увеличить его на один уровень (на одну индикаторную лампочку). При каждом следующем сеансе эпиляции поступайте таким же образом.

Прочтите подробные рекомендации касательно настройки уровня мощности в пункте «Уровень мощности» раздела «Начало работы с прибором SensEpi™ by beurer».

■ Избегайте повреждений кожи!

Не обрабатывайте одну и ту же поверхность кожи более одного раза за один сеанс эпиляции!

Не устанавливайте излишне высокий уровень импульса!

В случае ожога или вздутия кожи **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ ОБРАБОТКУ!**

■ Избегайте возможных осложнений после применения прибора SensEpi™ by beurer!

Избегайте попадания солнечных лучей на обработанную поверхность кожи!

Под пребыванием на солнце подразумевается постоянное воздействие прямых солнечных лучей в течение 15 минут, либо пребывание на рассеянном солнечном свете более одного часа. Во время процесса эпиляции и как минимум в течение 2 недель после последнего сеанса наносите на кожу крем для защиты от солнца с коэффициентом защиты 30 или выше.

Всегда сбривайте волосы, выступающие над обрабатываемой поверхностью; каждый раз обеспечивайте чистоту и сухость кожи.

Перед использованием SensEpi™ by beurer закройте пигментные пятна и татуировки.

Перед использованием SensEpi™ by beurer закройте темно-коричневые или черные пятна, например большие веснушки, родимые пятна или бородавки.

- Не смотрите прямо на свет, исходящий из аппликатора и вставного блока однонаправленного света прибора SensEpi™ by beurer.
- Не используйте прибор SensEpi™ by beurer для удаления волос в области грудных сосков и гениталий.
- Не используйте прибор SensEpi™ by beurer на участках, где позже Вы, возможно, захотите иметь волосы.
- Используйте прибор SensEpi™ by beurer только для удаления волос.
- Никогда не используйте аппликатор прибора SensEpi™ by beurer для направления светового импульса в открытое пространство. Каждый раз проверяйте, что при применении аппликатор направлен на кожу и находится с ней в полном контакте.
- В случае сильного нагрева кожи или аппликатора прекратите процедуру.
- Никогда не используйте воспламеняющиеся жидкости, например спирт (в том числе духи, дезинфицирующие средства или другие спиртосодержащие средства) или ацетон, для очистки кожи перед обработкой SensEpi™ by beurer.

- Применение SensEpil™ by beurer может вызвать кратковременное изменение пигментации кожи (см. раздел «Возможные побочные эффекты»).
- Храните прибор вне пределов досягаемости детей. Запрещается использовать прибор SensEpil™ by beurer для обработки кожи детей; также запрещается использование прибора детьми.

7. Снижение опасности травмирования

При пользовании прибором SensEpil™ by beurer, как и при пользовании любым другим электрическим прибором, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

- Держите прибор SensEpil™ by beurer подальше от воды!

SensEpil™ by beurer – это электрический прибор. Поэтому его необходимо держать подальше от воды.

Не кладите и не храните прибор SensEpil™ by beurer в местах возможного попадания воды, в ванной комнате, рядом с умывальником или сосудами с водой. Не кладите его в воду и не допускайте попадания на него воды или другой жидкости. Это может привести к серьезному удару током.

Не используйте прибор SensEpil™ by beurer, когда Вы принимаете ванну.

Не используйте прибор SensEpil™ by, когда он влажный или мокрый.

Не дотрагивайтесь до прибора SensEpil™ by beurer, если он упал в воду.

Если прибор SensEpil™ by beurer упал в воду, сразу отсоедините его от розетки.



Держите прибор SensEpil™ by beurer подальше от воды!

- Не открывайте прибор SensEpil™ by beurer!

Не пытайтесь открыть или самостоятельно отремонтировать прибор SensEpil™ by beurer. Вскрытие прибора SensEpil™ by beurer связано с риском получения серьезной травмы и/или повреждения глаз от опасных электрических компонентов и импульсной световой энергии.



Не пытайтесь открыть или самостоятельно отремонтировать прибор SensEpil™ by beurer.

- Попытка самостоятельно открыть прибор SensEpil™ by beurer может привести к его поломке и прекращает действие гарантии.
- Используйте прибор SensEpil™ by beurer только по его назначению и только в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по применению. Не оставляйте прибор SensEpil™ by beurer без присмотра, когда он подключен к розетке.
- Не используйте прибор SensEpil™ by beurer в случае повреждения кабеля или неисправности штепсельной вилки. Не допускайте касания кабеля подключения к сети нагретых поверхностей.
- Незамедлительно отключите прибор SensEpil™ by beurer, если при его использовании Вы увидели дым или почувствовали его запах.
- Не используйте прибор SensEpil™ by beurer, если в его работе появились сбои или он поврежден.

- Не используйте прибор SensEpil™ by beurer, если в его работе появились сбои или он поврежден.
- Не используйте прибор SensEpil™ by beurer, если датчик типа кожи на аппликаторе треснул или сломался.
- Не используйте прибор SensEpil™ by beurer, если внешний корпус треснул или распался.
- Не используйте прибор SensEpil™ by beurer при поврежденном вставном блоке однонаправленного света или если оптическая линза треснула, сломалась или отсутствует.
- Сразу после окончания использования SensEpil™ by beurer отсоедините кабель питания прибора от розетки.
- Перед очисткой прибора SensEpil™ by beurer отсоедините кабель питания прибора от розетки.
- Используйте прибор SensEpil™ by beurer только с присоединяемыми деталями и принадлежностями.

8. Возможные побочные эффекты при использовании прибора SensEpil™ by beurer

При использовании прибора SensEpil™ by beurer в соответствии с данными рекомендациями связанные с ним побочные явления не наблюдаются. Несмотря на это, любая косметическая процедура, включая те, которые проводятся в домашних условиях, связанная с определенным риском. Поэтому важно понимать и принимать возможность рисков и осложнений, которые могут возникнуть при использовании системы эпиляции с направленным лучом света в домашних условиях.

Нежелательное осложнение	Вероятность нежелательного осложнения	Нежелательное осложнение	Вероятность нежелательного осложнения
Пересечение или нагромождение импульсов на одном участке тела	Низкая	Небольшие болезненные ощущения на коже	Низкая
		Покраснение кожи	Низкая
		Повышенная чувствительность кожи	Низкая
		Раны и ожоги на коже	Редко
		Зарубцовывание тканей	Редко
		Изменение пигментации кожи	Редко
		Чрезмерное покраснение и вздутие кожи	Редко
		Инфекции	Маловероятно
Гематомы	Маловероятно		


- **Небольшие болезненные ощущения на коже** – Несмотря на хорошую переносимость проводимой дома процедуры световой эпиляции, большинство пользователей имеют неприятные ощущения на обрабатываемой поверхности кожи. Это ощущение покалывания, как правило, проходит само во время процедуры или через несколько минут после ее окончания.
Если неприятные ощущения имеют более длительный характер, это означает, что либо Вам следует прекратить пользоваться прибором SensEpil™ by beurer из-за индивидуальной непереносимости данной процедуры, либо что Вы выбрали слишком высокий уровень мощности.
- **Покраснение кожи** – Непосредственно после применения прибора SensEpil™ by beurer либо в течение 24 часов после процедуры может наблюдаться покраснение кожи. Как правило, покраснение кожи проходит в течение 24 часов. Если через 2–3 дня покраснение не прошло, обратитесь к врачу.
- **Повышенная чувствительность кожи** – Кожа на обрабатываемой поверхности является более чувствительной, поэтому на этих участках может возникнуть сухость или шелушение.

- **Раны и ожоги на коже** – В очень редких случаях после процедуры на коже могут возникнуть раны или ожоги. Для лечения ожогов или ран требуется несколько недель; после них в отдельных случаях могут оставаться рубцы.
- **Зарубцовывание тканей** – В очень редких случаях процесс зарубцовывания тканей может быть достаточно продолжительным. После зарубцовывания тканей на коже обычно появляется плоский белый рубец (гипотрофированный).
Также могут образовываться большие и красные (гипертрофированные) рубцы, либо большие рубцы, которые расширяются вокруг повреждения кожи (келоидные). Для улучшения внешнего вида рубцов позже можно выполнить их эстетическую обработку.
- **Изменение пигментации кожи** – Прибор SensEpil™ by beurer самостоятельно наводится на стержень волоса, в особенности на пигментированные клетки в волосяном фолликуле, или на волосяной фолликул. Однако при этом имеется риск возникновения гиперпигментации (более сильная пигментация или коричневый окрас) или гипопигментации (выцветание) окружающих тканей. Риск изменений, вызываемых пигментацией кожи, более высок у людей с темным цветом кожи. Обычно выцветание и изменение пигментации кожи являются кратковременными процессами; продолжительная гиперпигментация или гипопигментация наблюдаются в редких случаях.
- **Чрезмерное покраснение и вздутие кожи** – В редких случаях на обработанных участках кожи может возникнуть чрезмерное покраснение и вздутие. Это более типично для чувствительных участков. Покраснение и вздутие должно пройти в течение 2–7 дней; при этом к пораженным местам следует часто прикладывать лед. Допускается мягкая очистка кожи; однако следует избегать попадания на кожу прямых солнечных лучей.
- **Инфекции** – Инфекционные заболевания кожи являются редким явлением, однако имеется риск их возникновения в случае ожога или раны, возникших в результате применения прибора SensEpil™ by beurer.
- **Гематомы** – Применение прибора SensEpil™ by beurer в крайне редких случаях стать причиной возникновения внутренних кровоизлияний (синяков), которые сохраняются на коже в течение 5–10 дней. После исчезновения синяков на коже могут остаться следы буроватого цвета (гиперпигментация), которые могут сохраняться в течение более длительного времени.


9. Метод долговременного удаления волос с использованием прибора SensEpil™ by beurer

SensEpil™ by beurer – это прибор для долговременного удаления волос под действием световой энергии, подходящий для применения в домашних условиях. Метод удаления волос с помощью лазера и светового луча хорошо известен и признан во всем мире.


Этот метод вот уже 15 лет применяется в клиниках и врачебных кабинетах в разных странах и успел зарекомендовать себя как безопасный и эффективный способ, прекращающий рост волос на долгое время.

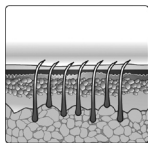

Перед применением прибора SensEpil™ by beurer

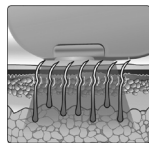

Во время применения прибора SensEpil™ by beurer

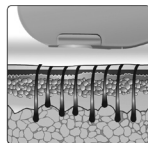

После применения прибора SensEpil™ by beurer

9.1. Каким образом свет удаляет волосы?

Метод световой эпиляции основан на теории селективного фототермолиза, при котором оптическая энергия предотвращает дальнейший рост волос. Для достижения этого термического эффекта стержень волоса должен селективно впитать световую энергию и преобразовать ее в тепло. Селективность достигается тем, что световая энергия, которая передается на ткани, в основном поглощается пигментом волосяного стержня, в то время как кожа и окружающие ткани остаются холодными. Меланин – это пигмент в стержне волоса, который отвечает за поглощение света; в результате образуется тепло, которое препятствует росту волоса. Чем больше меланина в волосе (то есть, чем темнее волос), тем больше света поглощается и тем более эффективно свет удаляет волосы.



Анаген – фаза роста



Катаген – фаза покоя



Телоген – фаза покоя


9.2. Как влияет цикл развития волоса на метод световой эпиляции?

Каждый наш волос проходит три фазы развития: анаген, катаген и телоген. Эти фазы оказывают большое влияние на данный метод световой эпиляции.

Фаза анаген – это фаза роста волоса; фазы катаген и телоген – это фазы покоя.

Продолжительность полного цикла роста волоса у разных людей различается и зависит от места роста волоса; в среднем она составляет от 18 до 24 месяцев.

В каждый момент времени волосяной фолликул может находиться в какой-нибудь области кожи в фазе покоя. На эти «отдыхающие» волосы прибор SensEpi™ by beurer не влияет. Обработке прибором SensEpi™ by beurer подлежат только волосы, находящиеся в фазе анагена. Поэтому важно понимать, что для обработки всех волосяных мешочков необходимо, чтобы волосы прошли полный цикл развития.

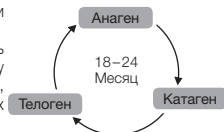

9.3. Составление плана эпиляции с помощью прибора SensEpi™ by beurer для получения лучшего результата

Стандартный цикл развития волоса составляет 18–24 месяца. Для достижения долговременного результата удаления волос с течение этого времени может потребоваться проведение нескольких сеансов эпиляции с помощью прибора SensEpi™ by beurer. Эффективность эпиляции для разных людей различна, кроме того она зависит от места обработки, цвета волос и от типа применения прибора SensEpi™ by beurer.

Стандартный план эпиляции с помощью прибора SensEpi™ by beurer в течение полного цикла развития волоса:

- Первые 3–4 сеанса эпиляции с применением SensEpi™ by beurer проводятся с интервалом в 2 недели.
- Следующие 5–7 сеансов эпиляции с применением SensEpi™ by beurer проводятся с интервалом в четыре недели.
- После этого используйте прибор SensEpi™ by beurer время от времени при необходимости, пока не будет достигнут долговременный результат.

Это стандартный план обработки, который обеспечивает лучшие результаты. Вы также можете составить свой собственный план эпиляции и получить удовлетворительные результаты.

Обратите внимание, что обработка одного участка, проводимая чаще 2 раз в неделю, не улучшает результат эпиляции. По причине гормональных или других физиологических изменений «отдыхающий» волосяной фолликул может снова стать активным. Поэтому время от времени может потребоваться проведение повторных сеансов эпиляции с использованием прибора SensEpi™ by beurer.

Достижение желаемых результатов эпиляции

Тип кожи по Фицпатрику	Цвет кожи	Сила света [дж/см ²]	Область тела ²	Среднее количество обработок	Эффективность (сокращение роста волос/новый рост волос в %) ¹
I–IV	от светло-коричневого до коричневого	3–4.5	ноги (верх и низ)	примерно 10–12 сеансов 1 раз в 4 недели	сокращение роста волос 60%
			руки		сокращение роста волос 50%
			зона бикини		сокращение роста волос 60%
			подмышки		сокращение роста волос 55%
I–IV	от коричневого до черного	3–4.5	ноги (верх или низ)	примерно 8–10 сеансов 1 раз в 2 недели	сокращение роста волос 70%
			руки		сокращение роста волос 60%
			зона бикини		сокращение роста волос 70%
			подмышки		сокращение роста волос 65%

¹ Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также от различных биологических факторов, которые могут влиять на цикл роста волоса. Поэтому среднее количество обработок зависит от индивидуальных особенностей пациентов.


² Одной-двух обработок для долговременного удаления волоса недостаточно. Продолжительность фазы покоя каждого отдельного волоса-ного фолликула также зависит от места его нахождения.

10. Начало работы с прибором SensEpil™ by beurer

10.1. Устройство прибора SensEpil™ by beurer

1. Выньте из коробки основной блок, аппликатор SensEpil™ by beurer и другие принадлежности.
2. Убедитесь, что вставной блок однонаправленного света правильно установлен на аппликаторе.
3. Подсоедините сетевой кабель к разъему основного блока прибора SensEpil™ by beurer.
4. Вставьте другой конец сетевого кабеля в сетевую розетку. Загорается **ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ**.

Прибор SensEpil™ by beurer готов к началу работы.

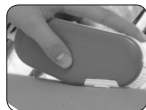

10.2. Первая обработка прибором SensEpil™ by beurer

Кожа должна быть выбрита, вымыта и высушена. При этом не следует пользоваться никакими антиперспирантами или дезодорантами.

5. Для включения прибора SensEpil™ by beurer переведите **СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** в положение **Вкл./Готов к работе**. **Индикатор готовности к работе** при включении сопровождается небольшим шумом (напоминающим шум фена).
6. Через 3,5 секунды после перевода **СЕТЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ** в положение **Вкл./Готов к работе** включается **ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ** и раздается один звуковой сигнал. Прибор автоматически устанавливается на самый низкий уровень мощности. После этого он готов к передаче первого импульса.
7. Для выбора более высокого или более низкого уровня заряда нажимайте регулирующий переключатель на «→» или «←» до достижения нужного уровня. Индикатор уровня мощности соответствует выбранному уровню мощности. (см. также раздел «Уровень мощности»).
8. Прижмите **головку аппликатора** к коже, пока не почувствуете устойчивое, мягкое давление. Убедитесь, что **головка аппликатора** полностью соприкасается с обрабатываемой поверхностью кожи.
9. Нажмите **кнопку подачи импульса**. После этого Вы увидите короткую вспышку света и услышите легкий щелчок. Это нормальный световой импульс, излучаемый данным прибором. Вы почувствуете мягкое тепло и мурашки. После этого прибор SensEpil™ by beurer заряжается для следующего импульса. Через 3,5 секунды снова загорается **ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ** и раздается звуковой сигнал.

Если импульс не отправляется и загорается индикатор системы предупреждения о типе кожи, это значит, что кожа на данном участке слишком темная для безопасной обработки. Попробуйте переместить аппликатор на другое место или свяжитесь с сервисной службой SensEpi™ by beurer (см. также раздел «Датчик типа кожи»).

10. Снимите *аппликатор* с обрабатываемой поверхности кожи.
11. Переместите *наконечник аппликатора* на следующий участок кожи. В качестве ориентира используйте оставшийся после прибора след на коже, чтобы при отправке следующего импульса избежать пропуска или повторной обработки того же участка (см. раздел «Обработка поверхности кожи»).

Предостережение: Не обрабатывайте одну и ту же поверхность кожи более одного раза за один сеанс эпиляции! Повторная обработка одного и того же участка кожи во время одного сеанса эпиляции может повысить вероятность возникновения побочных эффектов.

12. Повторяйте процедуру начиная с шага 5.

Уровень мощности

Уровень мощности определяет интенсивность светового импульса, который подается на кожу во время обработки. Для установки уровня мощности нажмите регулирующий переключатель уровня мощности, выбирая «-» или «+». Количество индикаторных лампочек соответствуют выбранному уровню мощности. Более высокий уровень мощности более эффективен, однако он связан с более высоким риском и может привести к осложнениям.

При первой обработке прибором SensEpi™ by beurer используйте самый низкий уровень мощности. Если первая обработка прошла безболезненно, то при следующей обработке Вы можете выбрать следующий по высоте уровень заряда и следующих обработках поступайте таким же образом.



Если Вы во время или после применения прибора SensEpi™ by beurer почувствовали боль, не повышайте уровень мощности (см. раздел «Возможные побочные явления»).

Не повышайте уровень мощности во время сеанса эпиляции, даже если Вы не чувствуете боли. Боль может появиться и через некоторое время после сеанса.

При каждом включении прибора SensEpi™ by beurer его мощность автоматически устанавливается на самый низкий уровень. При этом включена только одна *индикаторная лампочка уровня мощности*.

Для установки уровня мощности нажмите *регулирующий переключатель уровня мощности*, выбирая «-» или «+», чтобы соответственно уменьшить или увеличить *уровень мощности*. Количество *индикаторных лампочек уровня мощности* соответствуют выбранному уровню мощности.

Когда Вы используете прибор SensEpi™ by beurer в первый раз, система для Вашей безопасности автоматически устанавливает для первых 50 импульсов самый низкий уровень мощности, а для следующих уровней мощности (до 3) по 200 импульсов.

Для того, чтобы изменить эту настройку, нажмите регулирующий переключатель уровня мощности, выбирая «-» или «+», и не отпускайте его пока не услышите 2 последовательных звуковых сигнала.

Для того, чтобы изменить эту настройку, нажмите *регулирующий переключатель уровня мощности*, выбирая «-» или «+», и не отпускайте его пока не услышите 3 последовательных звуковых сигнала.

Датчик цвета кожи

Световая эпиляция при темном типе кожи может привести к различным побочным эффектам, например ожогам, вздутиям и изменениям цвета кожи (гипер- или гипопигментация).

Для того, чтобы избежать таких побочных явлений, прибор SensEpil™ by beurer оснащен уникальным датчиком типа кожи, который определяет пигментацию кожи во время и в начале каждого сеанса. Этот датчик отключает прибор SensEpil™ by beurer, если он определяет, что кожа слишком темная для безопасного применения.

Если световой импульс не отправляется и индикатор системы предупреждения о типе кожи мигает в течение 3 секунд, это значит, что датчик типа кожи оценил поверхность кожи как слишком темную для безопасной обработки. Попробуйте переместить аппликатор на другое место или свяжитесь с сервисной службой SensEpil™ by beurer компании beurer.

Обработка поверхности кожи

Импульсы прибора SensEpil™ by beurer следует прилагать в порядке рядов; при этом каждый следующий ряд нужно начинать с конца предыдущего и вести до другого конца.

Этот метод обеспечивает лучший контроль за охватом всех участков кожи и помогает избежать повторной обработки одной и той же поверхности или их пересечения. Головка АППЛИКАТОРА прибора SensEpil™ by beurer разработана таким образом, чтобы оставлять кратковременный след на обработанной поверхности кожи. Эти видимые следы помогают правильно расположить прибор для следующего импульса.



Не устанавливайте излишне высокий уровень импульса!
Не обрабатывайте одну и ту же поверхность кожи более одного раза за один сеанс!



В случае ожога или вздутия кожи **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ ОБРАБОТКУ!**

10.3. Результаты обработки прибором SensEpil™ by beurer.

Для многих людей, пользующихся прибором SensEpil™ by beurer, это первый опыт обращения с устройством на основе светового луча, предназначенного для домашнего использования. Прибор SensEpil™ by beurer прост в управлении, кроме того, процедура эпиляции занимает немного времени. Во время сеанса обработки прибором SensEpil™ by beurer следует принять во внимание следующее:

- **Шумящий вентилятор** – вентилятор прибора SensEpil™ by beurer создает шум, напоминающий звук работающего фена. Это нормально.
- **Треск при отправке импульса** – при активировании светового импульса HPL™ одновременно со вспышкой света слышится небольшой треск.
- **Небольшой след от аппликатора** – необходим для правильного расположения световых импульсов и является частью уникальной системы безопасности прибора SensEpil™ by beurer.

- **Ощущение тепла и мурашек** – во время каждого светового импульса появляется мягкое ощущение тепла и мурашек от энергии света.
Обратите внимание, что при первых сеансах важно выбирать низкие уровни мощности. После сеанса обработки прибором SensEpil™ by beurer Вы можете ощущать тепло в течение одного часа.
- **Красноватый или розовый цвет кожи** – во время или сразу после сеанса обработки прибором SensEpil™ by beurer, как правило, кожа имеет слегка розоватый оттенок. Обычно это больше заметно вокруг обработанного волоса. Если же наблюдается заметное покраснение кожи, вздутие или ожоги, незамедлительно прекратите обработку.

10.4. После обработки прибором SensEpil™ by beurer

- После завершения сеанса эпиляции выключите прибор SensEpil™ by beurer; для этого нажмите *СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Вкл./Откл.* Запомните последнюю используемую Вами настройку уровня мощности, так как при следующем включении прибора SensEpil™ by beurer она не сохранится.
- Отсоедините сетевой кабель от сетевой розетки.
- После сеанса рекомендуется очистить прибор SensEpil™ by beurer, в первую очередь *ГОЛОВКУ АППЛИКАТОРА* (см. раздел «Очистка прибора SensEpil™ by beurer»).
- После очистки рекомендуется поместить прибор SensEpil™ by beurer в его оригинальную коробку и держать подальше от воды.



Уход за кожей после сеанса эпиляции

Избегайте попадания солнечных лучей на обработанную поверхность кожи. Во время всего процесса эпиляции и как минимум в течение 2 недель после последнего сеанса обработки с прибором SensEpil™ by beurer наносите на кожу крем для защиты от солнца.



Побочные явления и осложнения

Некоторые пациенты могут заметить изменение пигментации кожи после обработки прибором SensEpil™ by beurer. Эти явления, как правило, незначительные и кратковременные. Однако, если у Вас возникли более серьезные осложнения (см. раздел «Возможные побочные явления при применении прибора SensEpil™ by beurer»), немедленно обратитесь к врачу.

11. Обслуживание прибора SensEpil™ by beurer

11.1. Очистка прибора SensEpil™ by beurer

После каждого сеанса эпиляции рекомендуется проводить очистку прибора SensEpil™ by beurer, и в особенности головки аппликатора.

- Перед очисткой отсоедините прибор SensEpil™ by beurer от розетки.
 - Для мягкой очистки прибора SensEpil™ by beurer и головки аппликатора используйте чистую сухую салфетку и обычное очищающее средство, например для компьютеров или экранов телевизоров.
- Никогда не погружайте прибор SensEpil™ by beurer или одну из его частей в воду!

11.2. Замена светового вставного блока

Вставной блок однонаправленного света прибора SensEpil™ by beurer может произвести 750 световых импульсов, чего обычно хватает для обработки ног, рук, подмышечных впадин и зоны бикини. Интенсивность импульсов соответствует выбранному уровню мощности прибора. В течение всего времени использования *вставного блока однонаправленного света* не происходит уменьшение мощности.

Когда *вставной блок однонаправленного света* будет израсходован на 90%, *индикаторная лампочка вставного блока однонаправленного света* на панели управления начнет мигать, что означает, что вскоре потребуется замена *вставного блока однонаправленного света*.

После того как будут израсходованы все 750 импульсов *вставного блока однонаправленного света*, *индикаторная лампочка вставного блока однонаправленного света* будет постоянно гореть, показывая, что импульсов больше не осталось.

Для того, чтобы продолжить сеанс эпиляции, *вставной блок однонаправленного света* необходимо заменить.



Пожалуйста, учтите следующее: *Вставной блок однонаправленного света* необходимо заменить, если в нем видны большие пятна или повреждена линза.

Замена вставного блока однонаправленного света:

1. Нажмите сетевой выключатель Вкл./Откл., чтобы выключить прибор SensEpil™ by beurer.
2. Отсоедините сетевую кабель от сетевой розетки.
3. Возьмите использованный вставной блок однонаправленного света с обеих сторон, вытяните его из гнезда аппликатора и утилизируйте его обычным способом.
4. Распакуйте новый вставной блок однонаправленного света.
5. Мягко вставьте новый вставной блок однонаправленного света на место.

Если вставной блок однонаправленного света установлен правильно, он выдвинется на пружине, когда Вы его нажмете и отпустите.



12. Устранение неисправностей

12.1. «Мой прибор SensEpil™ by beurer не включается»

- Убедитесь в правильности подсоединения сетевого кабеля к прибору SensEpil™ by beurer.
- Убедитесь, что сетевой кабель подсоединен к розетке сетевого питания.

12.2. «Когда я нажимаю на кнопку отправки импульса, световой импульс не отправляется»

Убедитесь в наличии достаточного контакта с кожей; *головка аппликатора* должна плотно и равномерно прилегать к коже. Для Вашей безопасности *кнопка подачи импульса* отправляет импульс только тогда, когда *головка аппликатора* плотно прилегает к коже.

- Проверьте участок обработки. Если индикатор типа кожи мигает 3 секунды, это значит, что Ваш тип кожи, находящийся под датчиком типа кожи, является слишком темным для безопасной обработки. Попробуйте переместить аппликатор на другое место или свяжитесь с сервисной службой SensEpil™ by beurer компании beurer.

- Проверьте *индикаторную лампочку* для замены *вставного блока однонаправленного света*. Если они включены, отключите прибор SensEpil™ by beurer и замените *вставной блок однонаправленного света*.
- Убедитесь, что *индикатор готовности к работе* включен.
 - Если *индикатор готовности к работе* не включается в течение 10 секунд, выключите прибор SensEpil™ by beurer, а затем снова включите; для этого два раза нажмите *сетевой выключатель Вкл./Откл.*
- Проверьте *индикатор готовности системы*.
 - Если этот индикатор работает, выключите, а затем снова включите прибор SensEpil™ by beurer; для этого два раза нажмите *сетевой выключатель Вкл./Откл.*



Не пытайтесь открыть или самостоятельно отремонтировать прибор SensEpil™ by beurer.

Вскрытие прибора SensEpil™ by beurer связано с риском получения серьезной травмы и/или повреждения глаз от опасных электрических компонентов и импульсной световой энергии. Попытка открыть прибор SensEpil™ by beurer может привести к его поломке и прекращает действие гарантии.

13. Часто задаваемые вопросы

1. Эффективен ли прибор SensEpil™ by beurer?

Да. При клинических испытаниях, проводимых врачами, прибор SensEpil™ by beurer доказал, что он может обеспечивать долговременные результаты удаления волос безопасным способом.

2. Какие места тела можно обрабатывать прибором SensEpil™ by beurer?

Прибор SensEpil™ by beurer предназначен для полного удаления волос на теле. Наиболее часто эпиляции с помощью прибора SensEpil™ by beurer подвергаются следующие места: ноги, подмышечные впадины, руки, зона бикини и лицо.

3. Какова продолжительность одного сеанса обработки прибором SensEpil™ by beurer?

Время зависит от обрабатываемого участка. Обработка ног может занять до 30 минут; обработка двух подмышечных впадин может занять 10 минут. Поскольку прибор SensEpil™ by beurer работает от сетевого электрического тока, его можно использовать столько, сколько необходимо для полноценного сеанса эпиляции на нужном участке.

4. Безопасен ли прибор SensEpil™ by beurer?

Прибор SensEpil™ by beurer разработан с учетом обеспечения Вашей безопасности, проверен и признан ведущими дерматологами и пластическими хирургами, чтобы соответствовать стандартам безопасности его использования в домашних условиях. Однако при использовании этого прибора, как и любого другого продукта или электронного прибора для обработки кожи, необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации и требуемые меры предосторожности.

5. Возникают ли болезненные ощущения при пользовании прибором SensEpil™ by beurer?

По отзывам большинства пользователей прибора SensEpil™ by beurer, при его правильном использовании наблюдается незначительное ощущение тепла в месте подачи светового импульса. Прибор может вызвать немного более

болезненные ощущения у пользователей с более толстыми и темными волосами, однако эти болезненные ощущения прекращаются по окончании сеанса эпиляции. Для лучшей переносимости в приборе SensEpil™ by beurer имеется пять уровней настройки, из которых можно выбрать наиболее подходящую в зависимости от вашей чувствительности.

6. Как часто следует проводить обработку прибором SensEpil™ by beurer?

После первого сеанса следует провести еще 3–4 сеанса эпиляции с помощью прибора SensEpil™ by beurer с интервалом в две недели. После этого сеансы эпиляции необходимо повторить , когда волосы отрастут снова, до достижения желаемого результата.

7. Эффективен ли прибор SensEpil™ by beurer при натуральных светлых или седых волосах?

Прибор SensEpil™ by beurer наиболее эффективен с темными волосами, то есть с волосами, содержащими большое количество меланина. Меланин – это пигмент, который придает коже и волосам цвет и поглощает световую энергию. Лучше всего реагируют черные и темно-коричневые волосы; коричневые и светло-коричневые волосы также реагируют, но для их полного удаления требуется большее количество сеансов эпиляции. Рыжие волосы меньше подходят для обработки. А светлые и седые волосы, как правило, не реагируют на прибор SensEpil™ by beurer, хотя некоторые пользователи также почувствовали результаты после нескольких сеансов эпиляции.

8. Можно ли использовать прибор SensEpil™ by beurer при темной или загорелой коже?

Не используйте прибор SensEpil™ by beurer, если у Вас естественный темный цвет кожи! Он не будет работать! Прибор SensEpil™ by beurer удаляет нежелательные волосы путем селективной обработки пигмента волоса. Определенное количество пигмента содержится также в окружающих кожных тканях. Большое количество пигмента в коже человека повышает степень риска, которому он подвергается при использовании прибора SensEpil™ by beurer. Обработка темной кожи прибором SensEpil™ by beurer может вызвать негативные последствия, такие как ожоги, вздутия и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация). В приборе SensEpil™ by beurer имеется уникальный датчик типа кожи, который измеряет пигментацию кожи на обрабатываемом участке в начале и во время каждого сеанса. Датчик типа кожи отключает прибор, если кожа не соответствует необходимым параметрам, и предотвращает дальнейшую отправку импульсов.

9. Когда появляются видимые результаты от использования прибора SensEpil™ by beurer?

Как и при использовании любого другого прибора на основе лазера или светового луча, результаты не появляются незамедлительно, и Вам даже может казаться, что вообще ничего не происходит. Иногда волосы после сеанса эпиляции отрастают снова, однако обычно большая часть этих волос выпадает через пару недель. Кроме того, при развитии волосы проходят три различные фазы, и прибор SensEpil™ by beurer действует только на волосы, находящиеся в активной фазе роста. Это основная причина, почему для получения желаемого результата необходимо проведение нескольких сеансов эпиляции.

10. Можно ли использовать прибор SensEpil™ by beurer мужчинам?

Несмотря на то, что прибор SensEpil™ by beurer разработан специально для женщин, он также подходит для использования мужчинами. Однако мужчинам для получения желаемого результата (обычно для удаления волос на груди) необходимо большее количество сеансов эпиляции.

11. Почему мои волосы продолжают расти несмотря на то, что я их обработала неделю назад?

Обычно кажется, что волосы продолжают расти в течение двух недель после сеанса эпиляции с использованием прибора SensEpil™ by beurer. Этот метод называется «выталкивание»; через две недели Вы увидите, что эти волосы выпали или выпадают при легком воздействии. (однако мы не рекомендуем вырывать волосы – пусть они выпадут сами). Также возможно, что отдельные волосы случайно не подверглись обработке или находились в фазах разви-

тия, на которые прибор SensEpi™ by beurer не оказывает влияния. Эти волосы следует обработать в течение следующих сеансов эпиляции; это является причиной, почему для достижения лучшего результата необходимо провести несколько повторных сеансов эпиляции с помощью прибора SensEpi™ by beurer.

12. Правда ли, что некоторые волосы после световой эпиляции становятся более редкими и тонкими?

Это явление отмечают многие косметологи и врачи, применяющие для эпиляции световые и лазерные приборы. Отдельные волосы после сеансов эпиляции с помощью прибора SensEpi™ by beurer становятся более редкими и тонкими. Обычно эти волосы представляют собой часть волос, которые были до этого на их месте, и для их полного удаления необходима повторная обработка.

13. Почему я не могу сделать эпиляцию на загорелой коже?

Не используйте прибор SensEpi™ by beurer для обработки загорелой кожи или сразу после пребывания на солнце! Загорелая кожа, особенно сразу после пребывания на солнце, содержит большое количество пигмента меланин. Это касается всех типов и цветов кожи, в том числе тех, которым требуется долгое время для образования загара. Наличие большого количества меланина в коже повышает риск негативных побочных эффектов при использовании прибора SensEpi™ by beurer, в том числе ожоги, вздутия и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация).

14. Представляет ли опасность для кожи продолжительное применение прибора SensEpi™ by beurer?

Световая и лазерная энергия в эстетической медицине применяется уже более 15 лет, и уже имеется достаточное количество материалов, подготовленных специалистами и специальными учреждениями, такими как клиника Майо. В этих материалах и учреждениях нет свидетельств возникновения побочных эффектов или каких-либо повреждений вследствие длительного пользования световыми или лазерными приборами.

15. Можно ли использовать прибор SensEpi™ by beurer для удаления волос на лице, в том числе на подбородке?

Прибор SensEpi™ by beurer можно использовать для удаления волос на лице ниже линии щек. При обработке лица необходимо проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить контакт с глазами. Никогда не используйте прибор SensEpi™ by beurer вблизи глаз. Избегайте попадания солнечных лучей на обрабатываемые участки кожи перед и после обработки прибором SensEpi™ by beurer. Для защиты кожи в течение трех недель до и после обработки носите закрывающую от солнца одежду или накладывайте защитный крем (коэффициент солнечной защиты больше 50).

16. Как долго следует защищать кожу от солнца после обработки прибором SensEpi™ by beurer?

После обработки прибором SensEpi™ by beurer следует защищать кожу от попадания солнечных лучей в течение 4 недель. Если у Вас имеются вопросы касательно воздействия на кожу солнечных лучей, обратитесь к врачу или в сервисную службу компании.

17. Нужно ли проводить какие-то определенные процедуры перед применением SensEpi™ by beurer?

Перед каждым сеансом обработки прибором SensEpi™ by beurer важно избегать попадания на обрабатываемые участки кожи солнечных лучей в течение минимум четырех недель. При этом рекомендуется наносить защитный крем с высоким коэффициентом УФ-защиты (более 50) или носить одежду, закрывающую обработанные участки. На обработанных участках следует сбривать волосы, а для очистки обработанных участков кожи использовать мягкое мыло с водой.






18. Как ухаживать за кожей после обработки прибором SensEpi™ by beurer?

Для очистки и ухода за кожей, обработанной прибором SensEpi™ by beurer, можно использовать обычные продукты по уходу за кожей. Особенно следует следить за тем, чтобы избежать попадания солнечных лучей на обработанные участки кожи. Для защиты от солнца пользуйтесь защитными кремами с высоким коэффициентом солнечной защиты (больше 50) и носите закрывающую одежду.

19. Нужно ли после обработки выдергивать волосы?

Нет, волосы постепенно выпадут сами. Это может занять до 2 недель.

14. Технические характеристики

Величина участка кожи		2 см x 3 см [6 см ²]
Скорость		1 импульс каждые 3,5 секунды: 1,7 см ² /сек.
Технология		Home Pulsed Light™
Максимальный уровень мощности		макс. 5 дж/см ²
Длина волны		475–1200 нм
Время загрузки/источник питания		продолжительное использование
Электрические характеристики		100–240 В переменный ток, 2 А
Продолжительность обработки голени		30 минут
Обслуживание и безопасность		Новый датчик типа кожи гарантирует, что прибора будет использоваться только на подходящем типе кожи. Датчик обеспечивает максимальную безопасность и контроль. Прост в обращении.
Величина упаковки		22 см x 22 см x 13 см
Температура	использование	от 10 до 40°C
	хранение	от -40 до +70°C
Относительная влажность воздуха	использование	от 30 до 75% (редокс-потенциал)
	хранение	от 10 до 90% (редокс-потенциал)
Атмосферное давление	использование	от 700 до 1060 гПа
	хранение	от 500 до 1060 гПа
Прибор, класс II		
Степень защиты от поражения током: рабочая часть типа BF		
WEEE — электронные и электрические приборы		
Символ CE		
Соблюдайте Руководство по эксплуатации		
Степень защиты от проникновения воды		средняя
Этот продукт не подходит для использования при наличии горячих анестезирующих соединений с воздухом, кислородом или оксидом азота.		

15. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления этих весов на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (например, картриджи),
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: электроприбор санитарно- гигиенический для эпиляции -
"ОС" Межрегиональная Сертификационная Компания "

№ РОСС DE.AB 52.В35739 срок действия с 18.03.2011 по 17.03.2014 гг.

Срок эксплуатации изделия: минимум 5 лет

Фирма изготовитель: Бойер Гмбх, Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО "Бойер" , ул. Перерва 62, корп 2 ,офис 3
109451 Москва, Россия

Сделано в Израиле.

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



AB 52

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

Краткое руководство

Устройство прибора SensEpil™ by beurer

1. Выньте из коробки *основной блок, аппликатор SensEpil™ by beurer и другие принадлежности.*
2. Убедитесь, что *вставной блок однонаправленного света* правильно установлен в *аппликаторе.*
3. Подсоедините сетевой кабель к разъему основного блока прибора SensEpil™ by beurer.
4. Вставьте другой конец сетевого кабеля в сетевую розетку. Загорается *индикатор готовности к работе.*

Прибор SensEpil™ by beurer готов к началу работы.

Первая обработка прибором SensEpil™ by beurer

Кожа должна быть выбрита, вымыта и высушена. При этом не следует пользоваться никакими антиперспирантами или дезодорантами.

5. Для включения прибора SensEpil™ by beurer переведите *сетевой выключатель в положение Вкл./Готов к работе.* *Индикатор готовности к работе* при включении сопровождается небольшим шумом (напоминающим шум фена).
6. Через 3,5 секунды после перевода *сетевого выключателя в положение Вкл./Готов к работе* включается индикатор готовности к работе и раздается один звуковой сигнал. Прибор автоматически устанавливается на самый низкий уровень мощности. После этого он готов к передаче первого импульса.
7. Для выбора более высокого или более низкого уровня заряда нажимайте регулирующий переключатель на «-» или «+» до достижения нужного уровня. Индикатор уровня мощности соответствует выбранному уровню мощности. (см. также раздел «Уровень мощности»).
8. Прижимайте *головку аппликатора* к коже, пока не почувствуете устойчивое, мягкое давление. Убедитесь, что *головка аппликатора* полностью соприкасается с обрабатываемой поверхностью кожи.
9. Нажмите *кнопку подачи импульса.* Сначала прибор определит Ваш цвет кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для проведения процедуры, прибор отправляет на кожу луч света. После этого Вы увидите короткую вспышку света и услышите легкий щелчок. Это нормальный световой импульс, излучаемый данным прибором. Вы почувствуете мягкое тепло и мурашки. После этого прибор SensEpil™ by beurer заряжается для следующего импульса. Через 3,5 секунды снова загорается *индикатор готовности к работе* и раздается звуковой сигнал.
10. Снимите *аппликатор* с обрабатываемой поверхности кожи.
11. Переместите *наконечник аппликатора* на следующий участок кожи. В качестве ориентира используйте след на коже, оставшийся после прибора, чтобы при отправке следующего импульса избежать пропуска или повторной обработки того же участка. (См. раздел «Обработка поверхности кожи».)
12. Повторяйте процедуру начиная с шага 5.



753.896 – 0511 Возможны ошибки и изменения