

Glaswaage

Typ: GS 320

GB Glass scale
F Pèse-personne en verre
E Báscula de vidrio para personas
I Bilancia in vetro

NL Weegschaal met glazen weegplateau
P Balança de vidro
TR Cam Terazi
GR Γυάλινη-սարք
DK Glasvægt

S Glasvåg
N Glassvekt
FIN Lasivaaka
RUS Стеклянные весы
PL Waga szklana
CZ Skleněná váha

SLO Steklena tehnica
H Üvegmérleg
RO Cântar de stică
الميزان الشخصي



Wir leisten 5 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemässer Bedienung beruhen
- für Verschleissteile
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

beurer



Hersteller und Service Deutschland
Beurer GmbH,
Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany
Tel: +49 (0)731/3989-144, Fax -255
www.beurer.de, kd@beurer.de



Gebrauchsanleitung

GB Operating Instructions
F Mode d'emploi
E Modo de empleo
I Istruzioni per l'uso
NL Gebruikershandleiding


P Instruções de utilização
TR Kullanma Talimatı
GR Οδηγίες χρήσης
DK Betjeningsvejledning
S Bruksanvisning

N Bruksveiledning
FIN Käyttöohje
RUS Инструкция по применению
PL Instrukcja obsługi

CZ Návod k použití
SLO Navodila za uporabo
H Használati utasítás
RO Instrucții de utilizare
الدليل الاستعمال

1. Inbetriebnahme

GB Getting started
F Mise en service
E Puesta en marcha
I Messa in funzione
NL Ingebruikname

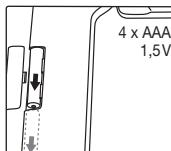

D Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.
CB Insert batteries or remove insulating strip.
F Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.

D Uhrzeit einstellen
Drücken Sie SET für mindestens 3 Sekunden, bis die Stundendeanzeige im Display zu blinken beginnt.
Mit ▲ und ▼ können Sie nun die Stunden richtig einstellen. Um Ihre Eingabe zu bestätigen, drücken Sie SET.
Nun blinken die Minutenziffern, die Sie mit ▲ und ▼ einstellen können. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit SET.

GB Setting the time
Press SET for at least 3 seconds until the hour setting in the display begins to flash.
You can now set the correct hour using ▲ and ▼. To confirm your entry, press SET.
Now the minute digits will flash. You can set them using ▲ and ▼. Confirm the entry by pressing SET.

P Colocação em funcionamento
TR İlk çalıştırma
GR Εναρξη λειτουργίας
DK Ibrugtagning

E Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.
D Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.
NL Plaats de batterij of verwijder de isolatieband.
P Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento.
TR Pilis takin veya izole koruma bandını çıkartın.
GR Τοποθετήστε τη μπαταρία και αφαιρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης.

F Réglér l'horloge
Appuyez sur SET pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure commence à clignoter à l'écran.
Utiliser ▲ et ▼ pour régler précisément les heures. Pour confirmer votre saisie, appuyez sur SET.
Désormais, les chiffres des minutes clignotent, que vous pouvez régler avec ▲ et ▼. Confirmez votre saisie avec SET.

E Ajuste de la hora
Pulse SET durante 3 segundos como mínimo hasta que comience a parpadear la indicación de la hora en la pantalla. Ahora puede ajustar las horas correctamente con ▲ y ▼. Para confirmar su entrada pulse SET.
Ahora parpadean las cifras de minutos, que puede ajustar con ▲ y ▼.

S Börja använda vågen
N Bruk
FIN Käyttöönotto
RUS Ввод в эксплуатацию
PL Uruchomienie

DK Indsæt batteri eller fjern isoleringsstremmel.
S Lägg in batteriet eller ta bort skyddsrem-sorna.
N Sett inn batteri eller fjern isoleringsstripene.
FIN Aseta paristo paikalleen ja poista eristyssuojanauha.
RUS Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.
PL Włożyć baterię lub usunąć ochronny pasek izolacyjny.

P Confirme su entrada con SET.
D Impostare l'ora
Premere SET per almeno 3 secondi, fino a quando l'indicatore dell'ora nel display comincia a lampeggiare.
Impostare l'orario corretto utilizzando ▲ e ▼.
Premere SET per confermare l'inserimento.
Ora lampeggiano le cifre dei minuti che possono essere impostate con ▲ e ▼. Confermare l'inserimento con SET.

NL De tijd instellen
Druk ten minste 3 seconden op de toets SET totdat de urenweergave in de display begint te knipperen.
U kunt nu de juiste tijd instellen met behulp van de toetsen ▲ en ▼. Druk op de toets SET om de invoer te bevestigen.
Nu knipperen de cijfers voor de minuten die u



CZ Uvedení do provozu
SLO Prvi vkllop
H Üzembe helyezés
RO Punerea în funcționare
التشغيل
CZ Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.
SLO Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak.
H Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsikot.
RO Introducerea bateriilor sau scoaterea benzilor de protecție pentru izolare.
ق بداخل البطاريات أو ق بزاله
أشرطة الحماية العازلة.

met ▲ en ▼ kunt instellen. Bevestig de invoer met de toets SET.

P Acertar a hora
Prima o botão SET durante, pelo menos, 3 segundos até a indicação das horas começar a piscar no visor.
Agora, use os botões ▲ e ▼ para acertar a hora correcta. Para confirmar a sua entrada, prima o botão SET.
Agora, começam a piscar os algarismos dos minutos que também poderá acertar com ▲ e ▼. Confirme, premindo o botão SET.


TR Saati ayarlayın
Saat göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar SET düğmesine en az 3 saniye basın.
▲ ve ▼ ile saatin doğru şekilde ayarlanabilirsiniz. Girişinizi onaylamak için SET düğmesine basın.
Şimdi ▲ ve ▼ ile ayarla-

<p>yabileceğiniz dakika rakamları yanıp söner. Girişinizi SET düğmesine basarak onaylayın.</p> <p>GR Púthiom̄ órás Píleste to SET για τουλάχιστον 3 δευτέροια, μέχρι να αρχίσει να αναβοθήνει στην οθόνη η ένδειξη ωρών. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε σωστά τις ώρες με τα ▲ και ▼. Για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία που εισαγάγατε, πίλεστε το SET. Τώρα αναβοθήνειν τα ψηφία των λεπτών, τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε με τα ▲ και ▼. Επιβεβαιώστε με το SET τα στοιχεία που εισαγάγατε.</p> <p>DK Indstilling af klokkeslæt Hold SET nede i mindst 3 sekunder, indtil tidsindstillingen på displayet begynder at blinke. Nu kan du indstille tiderne korrekt med ▲ og ▼. Bekræft indstillingen ved at trykke på SET. Nu blinker minutcifrene, som kan indstilles med ▲ og ▼. Bekræft indstillingen med SET.</p> <p>S Ställa in klockslag Tryck på SET i minst 3 sekunder tills tidsinställningen på displayen börjar blinka. Nu kan du ställa in önskad tid med ▲ och ▼. Tryck SET för att bekräfta inställningen. Nu börjar minutssiffrorna blinka. De kan du också</p> <p>D Temperaturanzeige (°C/F) Die Waage zeigt in der Grundeinstellung die Temperatur in °C an. Durch Drücken der Taste ▲ kann zwischen den Einheiten gewechselt werden.</p> <p>GB Temperature display (°C/F) In basic set-up, the scale displays the temperature in °C. Press the ▲ button to switch between units.</p> <p>F Affichage de la température (°C/F) Dans le réglage de base, la balance affiche la température en °C. En</p>	<p>ställa in med ▲ och ▼. Bekräfta inställningen genom att trycka på SET.</p> <p>N Stille inn klokkeslett Hold nede SET-knappen i minst 3 sekunder, inntil tidsindikatoren i displayet begynner å blinke. Bruk ▲ og ▼ for å stille inn timene. Trykk SET for å bekrefte. Minuttstifrene begynner nå å blinke, og du kan stille inn minuttene ved hjelp av ▲ og ▼. Trykk SET for å bekrefte.</p> <p>FI Kellonajan asettaminen Paina SET-painiketta väähintään kolmen sekunnin ajan, kunnes tuntinäytöllä alkaa vilkkua näytössä. Aseta haluamasi tunnit painamalla painikkeita ▲ ja ▼. Vahvista valinta painamalla SET-painiketta. Minuitteja osoittavat numerot alkavat vilkkua näytössä, ja voit muuttaa niitä painamalla painikkeita ▲ ja ▼. Vahvista valinta painamalla SET-painiketta.</p> <p>RU Настройка времени Удерживайте кнопку SET нажатой в течение не менее 3 секунд, пока индикация часов на дисплее не начнет мигать. Теперь с помощью кнопок ▲ и ▼ можно правильно настроить часы. Для подтверждения ввода нажмите SET. Начнут мигать минуты, установите их с помо-</p> <p>щью ▲ и ▼. Подтвердите ввод нажатием SET.</p>	<p>PL Ustawianie godziny Przytrzymaj przycisk SET przez co najmniej 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać cyfra godziny. Teraz za pomocą przycisków ▲ i ▼ ustaw prawidłowy czas. W celu potwierdzenia wprowadzonej wartości naciśnij przycisk SET. W tym momencie zacznie migać liczba minut, którą można ustawić za pomocą przycisków ▲ i ▼. Potwierdź wprowadzony czas naciskając przycisk SET.</p> <p>CZ Nastavte přesný čas Stiskněte tlačítko SET minimálně na 3 sekundy, dokud nezačne na displeji blikat zobrazení hodin. Pomocí tlačítka ▲ a ▼ nyní můžete nastavit hodiny. Po potvrzení zadání stiskněte tlačítko SET. Nyní blikají minuty, které můžete nastavit pomocí tlačítka ▲ a ▼. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka SET.</p> <p>RO Setarea orei Apăsați tasta SET timp de minim 3 secunde, până când afișajul orei de pe display începe să se aprindă intermitent. Acum puteți seta ora corectă cu tastele ▲ și ▼. Pentru a vă confirma intrările, apăsați tasta SET. Începe să se aprindă intermitent afișajul minutelor, pe care îl puteți seta cu tastele ▲ și ▼. Confirmăți intrările dumneavoastră utilizând tasta SET.</p>	<p>中文 ضبط الوقت اضغط على الزر SET لمدة 3 ثوان على الأقل، حتى أن يبدأ ببيان المساعات في الويب على الشاشة، والآن يمكنك ضبط الوقت المرغوب باستخدام الزر ▲ والزر ▼. قم بتنكيد عملية الإدخال والزr ▲ والزر ▼. قم بتنكيد عملية الإدخال باستخدام الزر SET. و عند تضمين أرقام الدقيق، التي يمكنك ضبطها باستخدام الزر ▲ والزr ▼. قم بتنكيد عملية الإدخال والزr ▲ والزر ▼. قم بتنكيد عملية الإدخال باستخدام الزر SET.</p> <p>TR Basarak birimler arasında geçiş yapabilirsiniz.</p> <p>GR Ένδειξη Θερμοκρασίας (°C/F) Στη βασική ρύθμιση η ζυγαρίδα εμφανίζει τη θερμοκρασία σε °C. Πιέζοντας το πλήκτρο ▲ μπορεί να γίνεται εναλλαγή ανάμεσα στις μονάδες.</p> <p>DK Temperaturvisning (°C/F) I grundindstilling viser vægten temperaturerne i °C. Der kan skiftes mellem enhederne ved at trykke på knappen ▲.</p>
---	--	--	--

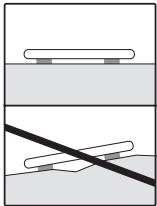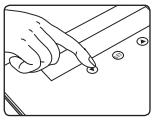S Temperaturindikator (°C/°F)	malla painiketta ▲ voit muuttaa yksikköä.	CZ Zobrazení teploty (°C/°F)	▲ gomb megnyomásával válthat át az egységek között.
I grundinställningen visar vägen temperaturen i enheten °C. Genom att trycka på knappen ▲ kan du byta enhet.		V základní nastavení zobrazuje váhu teplotu v °C. Stisknutím tlačítka ▲ můžete měnit jednotky.	
N Temperaturvisning (°C/°F)		SLO Pričak temperature (°C/°F)	
I grunninnstillingen vises temperatur i °C. Trykk ▲ for å veksle mellom enhetene.		Osnova nastavitev tehničice prikaže temperatu v °C. S pritiskom tipke ▲ lahko preklopite med enotami.	
FIN Lämpötilan osoitin (°C/F)		H Hőmérséklet-kijelzés (°C/F)	
Vaa'an perusasetuksena on lämpötilan näyttö °C-muodossa. Paina-		Alapbeállításban a méreg °C egységeben jelzi ki a hőmérsékletet. A	
			
D Waage auf einen ebenen und festen Boden stellen.	Pose la balance sur un sol plat et dur.	GR Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.	PL Ustaw wagę na twardym i płaskim podłożu.
GB Place the scale on a secure, flat surface.	Colocar la báscula sobre un suelo plano y estable.	DK Stil vægten på et jævnt, fast gulv.	CZ Postavte váhu na pevný a rovný podklad.
		S Placer vågen på ett jämnt och fast underlag.	SLO Tehnično postavite na čvrsto podlago oz. tla.
kg → lb → st:lb d = 0,1 kg/0,2 lb/1 lb	Plazza de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.	N Plasser vekten på et jevnt og fast underlag.	H Állítsa a mérleget szilárd, vízszintes felületre.
	Colocar a balança sobre piso nivelado e firme.	FIN Aseta vaaka tasaiselle ja tukkevalle alustalle.	RO Așezați cânțarul pe o podea fixă netedă.
	Teraziyi düz ve sağlam bir yüzey üzerine koyun.	RUS Установить весы на прочную ровную поверхность.	AR ضع الميزان على أرضية صلبة ومستوية.
			
D Waage ist umschaltbar.	P A balança é comutável.	PL Istnieje możliwość zmiany jednostek wagi.	
GB Scales can be switched to alternative units of measurement.	TR Terazi modu değiştirilebilir.	CZ Váhu lze přepínat.	
F La balance est réglable.	GR Η ζυγαριά μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.	SLO Tehnično je moč preklopiti.	
E La báscula es comutable.	DK Vægten kan omstilles.	H A mérleg bekapsolható.	
I La bilancia è commutabile.	S Vägen går att ställa om.	RO Cânțarul prezintă posibilitatea de comutare între trepte.	
NL De weegschaal is omschakelbaar.	N Vekten kan stilles om.	AR الميزان قابل التحويل.	
	FIN Mittayksikön voi valita.		
	RUS Весы переключаются.		

2. Wiegen

GB Weighing
F Pesée
E Pesado
I Pesatura
NL Wegen

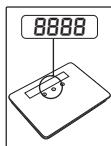

P Pesar
TR Tartma
GR Ζύγιση
DK Vejning
S Vägning

- (D) Waage antippen und warten bis „0.0 kg“ erscheint.
- (B) Touch the scale and wait until “0.0 kg” appears.
- (F) Appuyer sur la balance et attendre que « 0.0 kg » s'affiche.
- (E) Toque ligeramente la báscula y espere hasta que aparezca “0.0 kg”.
- (I) Accendere la bilancia con una leggera pressione e attendere che venga visualizzato “0.0 kg”.
- (NL) Druk kort op de weegschaal en wacht totdat “0.0 kg” wordt weergegeven.
- (P) Tocar com o dedo do pé na balança e espere

D Waage betreten.
GB Step onto the scale.
F Montez sur le pèse-personne.
E Súbase a la báscula.
I Salire sulla bilancia.
NL Stap op de weegschaal.

- (D) Stehen Sie während des Messvorgangs still!
- (B) Stand still whilst being weighed!
- (F) Ne bougez pas pendant la mesure !
- (E) ¡Durante el proceso de medición permanezca quieto!
- (I) Restare fermi durante il processo di pesatura!
- (NL) Sta stil tijdens het wegen.

N Foreta veiling
FIN Punnitus
RUS Взвешивание
PL Ważenie
CZ Vážení

- (D)rar que surja a indicação “0.0 kg”.
- (TR) Teraziye ayağıınızla dökünen ve “0.0 kg” görünen kadar bekleyin.
- (GR) Αγγίξτε τη ψυγαριά και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη « 0.0 kg ».
- (DK) Tryk på vægten, og vent, indtil der vises “0.0 kg”,
- (S) Vidrör vägen och vänta tills ”0.0 kg” visas.
- (N) Trykk kort på vekten og vent til ”0.0 kg” vises.
- (FIN) Kosketa vaaka kevyesti ja odota, kunnes näyttöön tulee näkyviin lukema ”0.0 kg”.
- (RU) Коснитесь весов и подождите, пока не появится « 0.0 кг ».

P Subir para a balança.
TR Teraziye çıkmak.
GR Ανεβείτε στη ψυγαριά.
DK Træd op på vægten.
S Ställ dig på vägen.
N Gå opp på vekten.
FIN Astu vaaalle.

- (P) Não se mexa durante o processo de pesagem!
- (TR) Tartma esnasında hareketsiz durun!
- (GR) Σταθείτε ακίνητος κατά τη διαδικασία μέτρησης!
- (DK) Stå stille under vejningen!
- (S) Stå stilla under mätningen!
- (N) Stå stille mens veilingen pågår!
- (FIN) Seiso punnitukseen aikana liikkumatta.

SLO Tehtanje
H Mérés
RO Cânărire
الوزن

- (PL) Dotknij wagę i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0.0 kg”.
- (CZ) Poklepňete na váhu a počkejte, dokud se na displeji neobjeví „0.0 kg”.
- (SLO) Na kratko se dotaknite tehnicne, da se pojavi »0.0 kg«.
- (H) Nyomja meg a lábával kissé a mérleget, és várja meg a „0.0 kg” kijelzés megjelenését.
- (RO) Atingeți cânțarul și așteptați până când se afișează „0.0 kg”.

انقر بقدمك على الميزان وانتظر
إلى أن يظهر البيان kg .

RUS Встать на весы.
PL Wejdź na wagę.
CZ Stoupněte si na váhu.
SLO Stopite na tehtnico.
H Álljon rá a mérlegre.
RO Așezați-vă pe cânătar.
الوقف على الميزان.

- (RUS) Во время взвешивания стойте неподвижно!
- (PL) Podczas ważenia należy stać bez ruchu!
- (CZ) Během vážení stůjte tisí!
- (SLO) Med tehtanjem stojeť mírno!
- (H) A mérés idején álljon nyugodtan!
- (RO) În timpul procesului de măsurare stați nemîșcat(ă)!

قف أثناء عملية القياس في وضع
ساكن!



3. Fehlermeldung

GB Error messages
F Messages d'erreur
E Avisos de errores
I Messaggi di errore
NL Foutmeldingen

F Mensagens de erro
TR Hata mesajları
GR Μηνύματα σφαλμάτων
DK Fejlmeldelse
S Felmeddelanden

N Feilmeldinger
FIN Virheilmoitukset
RUS Сообщения об ошибках
PL Komunikaty błędów
CZ Chybová hlášení

SLO Javljene napake
H Hibajelzések
RO Mesaje de eroare
بـلـاغـاتـ الـخطـاـ

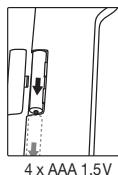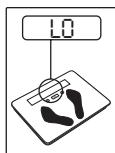

4 x AAA 1,5V



D Maximale Tragkraft überschritten
GB Maximum weight capacity exceeded
F Poids maximal dépassé
E Capacidad de carga máxima superada
I Superamento della portata massima
NL Maximale draagkracht overschreden
P Capacidade de carga máxima ultrapassada

TR Maksimum taşıma kapasitesinin üzerine çıktınız
GR Υπέρβαση ανώτατου ορίου αντοχής
DK Maksimal bærekraft overskredet
S Den maximała bärkraften är överskriden
N Maksimumsvikten er overskredet
FIN Maksimipaino ilitty
RUS Превышен максимальный вес

PL Przekroczone maksymalną nośność
CZ Překročení maximální nosnosti
SLO Prekračena je maksimalna nosilnost
H Túllépte a maximális teherbírást
RO S-a depășit capacitatea portantă maximă.
تجازوا الحـad الأقصـى لـقدـرة تـحملـ المـيزـانـ

تجاوزـ الحـad الأقصـى لـقدـرة تـحملـ المـيزـانـ

D Allgemeine Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 180 kg (396 lb / 28 st), Einteilung 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und zu nahen Wärmequellen.
- Steigen Sie nie einseitig auf den äußersten Rand der Waage: Kippgefahr!
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern!
- Nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Kundenservice.
- Prüfen Sie vor jeder Reklamation die Batterien und wechseln Sie diese ggf. aus.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.

- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien und Akkus sind über die speziell gekennzeichneten Sammelbehälter, die Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler zu entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.
- Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Garantie

Sie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
- für Verschleißteile,
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unserem eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.


GB General advice

- Max. capacity 180 kg (396 lb / 28 st), Graduation 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Protect the scale against knocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic fields and sources of heat that are too near.
- Never step onto the outer edge of the scale with one foot as this could cause the scales to tip!
- Keep packaging material away from children!
- Not intended for commercial use.
- Should you have any questions regarding operation and usage of our appliances, please contact your local retailers or Customer Service.
- Before making a claim, please check the batteries and replace them if necessary.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised suppliers.
- Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers. You are legally obliged to dispose of the batteries.
- Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows:
Pb= Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury.
- Follow local regulations regarding the disposal of materials. The appliance should be disposed of according to Regulation 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In case of queries, contact the municipal authorities responsible for waste disposal in your area.



F Conseils d'ordre général

- Résistance jusqu'à 180 kg (396 lb / 28 st), Graduation 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- Protégez la balance contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur trop proches.
- Ne vous tenez jamais sur le bord extérieur de la balance : danger de basculement !
- Eloignez les enfants du matériel d'emballage !
- Non prévue pour un usage industriel.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente de.
- Avant toute réclamation, vérifiez l'état des batteries et changez-les le cas échéant.
- Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation.
- Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers. La loi vous oblige d'éliminer les piles.
- Remarque: Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques:
Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.
- Lors de l'élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour éliminer l'appareil, conformez-vous à la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination de ces déchets.

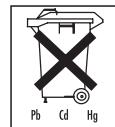

E Indicaciones generales

- La capacidad de carga es de máx. 180 kg (396 lb / 28 st), Precisión 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- Proteja la báscula de golpes, humedad, polvo, sustancias químicas, grandes cambios de temperatura, campos electromagnéticos y de la cercanía de fuentes de calor.
- Nunca suba por un sólo lado sobre el borde exterior de la báscula: ¡peligro de vuelco!

- ¡Mantenga a los niños alejados del material de embalaje!
- Dispositivo no previsto para el uso industrial.
- Si todavía tuviese preguntas sobre la utilización de nuestros aparatos, sírvase dirigirse a nuestro representante o al servicio técnico de.
- Antes de cada reclamo controle las pilas y en caso de que fuese necesario cámbielas.
- Las reparaciones sólo deben ser realizadas por el servicio al cliente o comerciantes autorizados.
- Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.

Según el ley hay que desechar las pilas.

- Nota: Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias contaminantes:

Pb = la pila contiene plomo,
Cd = la pila contiene cadmio,
Hg = la pila contiene mercurio.




- Siga las prescripciones de las autoridades locales respecto a la eliminación de los materiales. Elimine el aparato de acuerdo con la Directiva 2002/96/CE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment). Si tiene alguna duda diríjase a las autoridades municipales competentes para la eliminación de desechos.



Indicazioni generali

- Portata max. 180 kg (396 lb / 28 st), Graduazione 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detergente. Non immergere mai la bilancia in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente.
- Non esporre la bilancia a urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura, campi elettromagnetici e fonti di calore troppo vicine.
- Non salire mai sul bordo esterno della bilancia e solo su un lato: pericolo di ribaltamento!
- Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio!
- Non adatta all'utilizzo commerciale.
- In caso di dubbi o domande circa l'impiego delle nostre apparecchiature, rivolgersi al rivenditore o al servizio clienti.
- Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio Clienti o da rivenditori autorizzati.
- Le batterie e le pile completamente esaurite e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico.

• Avvertenza: le batterie e le pile che contengono sostanze dannose sono contrassegnate con queste sigle:
Pb = pile contenente piombo,
Cd = pile contenente cadmio,
Hg = pile contenente mercurio.

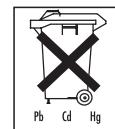


• Rispettare le disposizioni locali per lo smaltimento dei materiali. Smaltire l'apparecchio conformemente alla direttiva sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici 2002/96/CEE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Per domande specifiche su questo argomento rivolgersi all'ufficio comunale competente per lo smaltimento ecologico.



NL Algemene aanwijzingen

- De maximale belasting is 180 kg (396 lb / 28 st), Verdeling van 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Stap nooit op één zijde op de buitenste rand van de weegschaal: Kantelgevaar.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Mocht u nog vragen hebben over de toepassing van onze toestellen, neemt u contact op met uw handelaar of met de klantendienst van.
- Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze eventueel.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uitgevoerd.
- Breng de lege batterijen naar een inzamelpunt voor lege batterijen en accu's (klein en gevaarlijk afval), of geef ze af in een elektro-zaak.
U bent wettelijk verplicht, de batterijen op te ruimen.
- Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten: Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de batterij bevat kwik.
- Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.

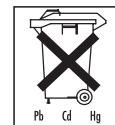

□ Indicações gerais

- A capacidade de carga máx. é de 180 kg (396 lb / 28 st), Divisão mínima: 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- Proteja a balança contra embates, humidade, pó, produtos químicos, variações acentuadas de temperatura, campos electromagnéticos e fontes de calor demasiado próximo.
- Nunca coloque todo o seu peso sobre o rebordo exterior da balança: perigo de tombar!
- Mantenha as crianças afastadas do material de embalagem!
- Não se destina ao uso comercial.
- Se quiser colocar mais alguma questão em relação ao uso dos nossos equipamentos, contacte a loja onde comprou a balança ou o serviço de assistência a clientes da.
- Antes de reclamar, verifique se as baterias estão carregadas e substitua-as, se necessário.
- As reparações só poderão ser efectuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou então por revendedores autorizados.
- Para dar o tratamento ecológico correcto às pilhas e aos acumuladores gastos ou totalmente descarregados, estes devem ser introduzidos nos respectivos recipientes identificados para o efeito ou entregues nos locais de recepção de resíduos especiais ou numa loja de electrodomésticos.

Existe uma obrigação legal de dar um tratamento ecológico às pilhas.

- Indicação: Você encontra os símbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas:

Pb = a pilha contém chumbo,

Cd = a pilha contém cádmio,


Hg = a pilha contém mercurio.

- Siga as disposições locais relativas à eliminação dos materiais. Elimine o aparelho de acordo com o Regulamento do Conselho

Europeu relativo a resíduos de equipamentos elétricos e electrónicos 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). No caso de perguntas, queira dirigir-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.



- Teraziyi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden, elektromanyetik alanlardan ve çok yakın ısı kaynaklarından koruyun.
- Asla terazinin üzerine en dış kenarından çıkmayın: Devrilme tehlikesi!
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun!
- Ticari amaçlı kullanımları için öngörmemiştir.
- Aletlerimin kullanımları hakkında başka sorularınız varsa, satıcınıza veya Müşteri Servisine başvurunuz.
- Her reklamasyon öncesinde pilleri kontrol edin ve gereklirse değiştirin.
- Tamir işlemleri yalnızca müsteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.
- Kullanılmış ve tamamen bitmiş pillerin, özel işaretli çöp bidonlarına veya özel çöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gereklidir. Pilleri imha etmeye yasal olarak yükümlüsünüz.
- Not: Zararlı madde ihtiya eden pillerin üzerinde şu işaretler vardır:
Pb = Pil kursun hırvı eder,
Cd = Pil kursun kadmiyum ihtiya eder,
Hg = Pil crva ihtiya eder.
- Malzemelerin atığa çıkartılmasında, yani giderimesinde yerel yönetmeliklere uygunuz. Cihazı, elektrikli ve elektronik eski cihazlar yönetmeliği 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uyarınca gideriniz. Sorularınız olması halinde, lütfen giderme veya atık ile ilgili yetkili yerel bir makama başvurunuz.

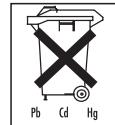

GR Γενικές οδηγίες

- Η μέγ. αντοχή είναι 180 kg (396 lb / 28 st), Διάρεση 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πανί, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάξετε λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μη βυθίσετε ποτέ ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Προστατέψτε τη ζυγαριά από χτυπήματα, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, έντονη εναλαγή θερμοκρασίας και κρατήστε τη μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πηγές θερμότητας.
- Σε καμία περίπτωση να μη στηρίζεστε στο εξωτερικό άκρο της ζυγαριάς μόνο από τη μια πλευρά: Κίνδυνος ανατροπής!
- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά!
- Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις για τη χρήση των συσκευών μας, παρακαλείσθε ν' απευθύνθετε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου.
- Προτού προβείτε σε κάποια καταγγελία, ελέγχετε τις μπαταρίες και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις.
- Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από εξουσιοδοτημένους εμπόρους.

TR Genel açıklamalar

- Yükleme kapasitesi maks. 180 kg (396 lb / 28 st), Ölçeklendirme 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuşlu bir nemli bez ile teraziyi temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.


- Οι πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να αποσύρονται μέσω των ειδικά σημασιένων δοχείων συλλογής, των κέντρων συλλογής ειδικών απορριμάτων ή μέσω του καταστήματος, από το οποίο αγοράσατε τη ζυγαριά.
- Τα ακόλουθα σύμβολα θα βρείτε σε μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες:
Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο,
Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο,
Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.
- Για την απορριμματική διαχείριση των υλικών τηρείτε τις τοπικές διατάξεις. Εκτελείτε την απορριμματική διαχείριση της συσκευής σύμφωνα με τη διάταξη για παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις όσουν αφορά την απορριμματική διαχείριση έρχεστε σε επαφή με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.



du er i tvivl, bedes du henvende dig til de relevante kommunale myndigheder.

S Allmänna anvisningar

- Kapacitet max. 180 kg (396 lb / 28 st), Noggrannhet 100 g (0,2 lb / 1 lb).
 - Rengöring: Rengör vägen med en fuktig klut, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vägten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
 - Beskyt vægten mod stød, fugt, støv, kemikalier, stærke temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og for nære varmekilder.
 - Sätt aldrig op på den yderste kant af den ene side på vægten: Vippefare!
 - Hold børn på afstand af emballagematerialet!
 - Ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
 - Hvis de har yderligere spørgsmål vedr. brugen af vore vægte, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til kundeservice.
 - Kontroller altid batteriene og udskift dem eventuelt inden en evt. reklamation.
 - Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.
 - De brugte, helt afladde alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i de batteribokse, der forefin des i butikker og supermarkeder.
- Du er forpligtet til at bortskaffe batterier korrekt.
- Bemærk: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde:
Pb = batteriet indeholder bly,
Cd = batteriet indeholder kadmium,
Hg = batteriet indeholder kviksolv.
 - Følg de lokale forskrifter ved bortskaffelse af materialerne. Bortskaf apparatet i henhold til forordningen om brugt elektrisk og elektronisk udstyr 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis

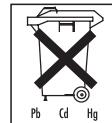

N Generelle merknader

- Vekten måler op til 180 kilo (396 lb / 28 st) i 100 grams (0,2 lb / 1 lb) intervall.
- Rengjøring: Vekten kan rengjøres med en fuktig klut som eventuelt er påført litt oppvaskmiddel. Aldri dypp vekten i vann. Vekten skal heller aldri skylles under rennende vann.
- Beskytt vekten mot støt, fuktighet, støv, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og for nært plasserte varmekilder.
- Trå aldri ytterst på den ene siden av vekten: Vekten kan velte!
- Barn må holdes unna emballasjematerialet!
- Vekten er kun ment for personlig bruk, og er ikke tiltenkt for medisinsk eller yrkesmessig bruk!

- Hvis du har andre spørsmål angående bruken av et av våre produkter, kan du henvende deg til forhandleren din eller kundeservicen.
 - Test/bytt ut batteriene før du foretar en reklamasjon.
 - Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler.
 - De brukte, utladede batteriene avhendes i spesielle samlebeholdere eller deponier for spesialavfall eller leveres inn hos en elektroforhandler.
- Du er lovmessig forpliktet til å avhende batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.
- Merk: Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:
Pb = batteriet inneholder bly,
Cd = batteriet inneholder kadmium,
Hg = batteriet inneholder kvikksølv.
 - Følg de lokale forskriftene ved avhending av materialene. Vekten skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet 2002/96/EF (Waste Electrical and Electronic Equipment) for avhending av elektrisk og elektronisk avfall. Hvis du har spørsmål angående dette, kan du henvende deg til de kommunale styresmaktene som har ansvar for avfallshåndteringen.



(FIN) Yleisiä ohjeita


- Kantavuus enintään 180 kg (396 lb / 28 st), Näyttöväli 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Puhdistus: Voit puhdistaa vaa'an kostetulla liinalla, johon voit lisätä tarvittaessa hieman huuhteluanetta. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtelee vaakaa juoksevan veden alla.
- Suojaaa vaaka iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilanvaihteluilta, elektromagneettisilta kentiltä ja suorilta lämmönlähteiltä.
- Seiso aina keskellä vaakaa, älä vain toisella reunalla: kaatumisvaara!
- Älä jätä pakausmateriaalia lasten ulottuville!
- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.
- Jos haluatte kysyä lisää laitteemme soveltamisesta, käänny myyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
- Ennen reklamaation tekemistä tarkista ensin paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
- Korjausksia saa tehdä vain asiakaspalvelu tai valtuuttettu myyjä.
- Käytetysti, täyssin purkautuneet paristot ja akut on kerätävä erikoisesti merkityihin keräysastioihin, ongelma-jätekeräyspisteiden tai sähköalan myyjän kautta. Lain mukaan olet velvollinen huolehtimaan paristojen hävittämisestä.
- Huomautus: Nämä merkit löydät vahingollisiaaineita sisältävistä paristoista: Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.
- Noudata materiaalien hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä. Hävitä laite sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan



direktiivin 2002/96/EY – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaan. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä hävittämisestä vastaavaan kunnan viranomaiseen.

[RUS] Общие указания

- Максимальная нагрузка составляет 180 кг (396 lb / 28 st). Цена деления 100 г (0,2 lb / 1 lb).
 - Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
 - Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
 - Никогда не вставайте на один край весов: Опасность опрокидывания!
 - Не давайте упаковочный материал детям!
 - Не предназначены для коммерческого использования.
 - Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
 - Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
 - Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
 - Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами. Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
 - Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы:
- Pb = в батарейке содержится свинец,
Cd = в батарейке содержится кадмий,
Hg = в батарейке содержится ртуть.
- При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

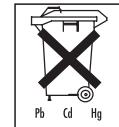

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашающиеся части (батарейки)

- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,

Софтингер штрасе 218

89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва,

ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.

Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495-658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

(PL) Wskazówki ogólne

- Maksymalne obciążenie wynosi 180 kg (396 lb / 28 st), Dokładność 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Czyszczenie: Wagę można czyścić z wilgotną ścieżeczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie.
- Waga należy chronić przed wstrząsami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniem temperatury oraz polami elektromagnetycznymi. Urządzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko źródeł ciepła.
- Nie wolno stawać z jednej strony na krawędzi wagi – waga może się przeszyć!
- Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci!
- Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania naszych urządzeń prosimy o zwrócenie się do sprzedawcy lub działu obsługi klienta firmy.
- Przed złożeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić baterie i w razie potrzeby je wymienić.
- Napравы mogą być przeprowadzane tylko przez serwis producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
- Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucone do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia baterii.

- Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancje szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadmu, Hg = bateria zawiera rtęć.




• Przestrzegaj miejscowych przepisów dot. utylizacji odpadów. Urządzenie utylizować zgodnie z zaleceniem dot. urządzeń elektronicznych użytkowej 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań lub wątpliwości należy się zwrócić do właściwego działu komunalnego, zajmującego się utylizacją.



(cz) Obecné pokyny

- Zatížitelnost je max. 180 kg (396 lb / 28 st), Dělení 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadíku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Váhu chráňte před nárazy, vlnkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
- Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy nebezpečí převrhnutí!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obrátěte se prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis.
- Před každou reklamací nejdříve zkонтrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Použité a úplně vybité baterie a akumulátory musí být odklizeny do speciálně označených sběrných nádob, do sběren nebezpečného odpadu nebo do specializovaných elektro prodejen. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
- Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivin se nachází následující symboly: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmu, Hg = baterie obsahuje rtuť.
- Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obrátěte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.

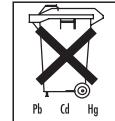

(SLO) Splošni napotki

- Maksimalna obremenitev znaša 180 kg (396 lb / 28 st), Razdelitev 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Čiščenje: Tehnico lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne topljajte tehnic v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.

- Zaščitite tehnicco pred udarci, vlago, prahom, kemijskimi, velikimi temperaturnimi nihanji, elektromagnetnimi polji in v bližini se nahajajočih virov topote.
- Nikdar ne stopite enostransko na zunanj rok tehnicce: lahko se prekucnete!
- Ne dovolite stika otrok s pakirnim materialom!
- Ni za gospodarske namene.
- Če imate kakšna vprašanja glede uporabe naše naprave, se prosimo obrnite na našega zastopnika ali na servisno službo družbe.
- Pred vsako reklamacijo najprej preverite baterijske vložke, in jih po potrebi zamenjajte.
- Popravila se smejo opravljati le v servisni službi ali pri pooblaščenih trgovcih.
- Uporabljene, izpraznjene baterije ali akumulatorje je potrebno odstraniti v specialne označene zbirne smetnjake, na posebnih zbirnih mestih ali preko elektro-zastopnika.

Zakonsko ste obvezujoči pravilno odstraniti baterije.


- Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi:
Pb = baterija vsebuje svinec,
Cd = baterija vsebuje kadmij,
Hg = baterija vsebuje živo srebro.
- Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje materialov. Aparat odstranite v skladu z Uredbo o električnih in elektronskih odpadnih napravah 2002/96/ES – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Če imate vprašanja, se obrnite na komunalni organ, ki je pristojen za odstranjevanje odpadkov.



elektromos cikkeket árusító helyekre kell beszállítani és ott leadni.

Önnek törvényben előírt kötelessége az elemeket környezetkímélő módon kivonni a forgalomból használat után.


- Tudnivalók: Károsanyagtartalmú elemeken a következő jelöléseket találja:
Pb = az elem ólmot tartalmaz,
Cd = az elem kadmiumpot tartalmaz,
Hg = az elem higanyt tartalmaz.
- Az anyagok ártalmatlantásakor tartsa be a helyi előírásokat! A készülék ártalmatlantásáról gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékek-ről szóló 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. További felvilágosítás érdekében forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz!

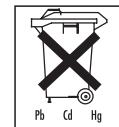

(H) Általános utasítások

- Terhelhetőség max. 180 kg (396 lb / 28 st), Dokładność 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószert vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó viz alatt!
- Óvja a mérleget az ütődésektől, a nedvességtől, a portól, a vegyszerekől, az erős hőmérséklet-ingadozástól, az elektromágneses mezőktől és a túl közeli hőforrásoktól.
- Soha ne álljon a mérleg egyik külső peremére: borulásveszély!
- A csomagolányapot gyermeketől tartsa távol!
- Nem üzleti célú alkalmazásra készült.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a ügyfélszolgálati irodájához.
- minden reklamáció előtt ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket.
- A javítást csak szakszerviz vagy arra felhatalmazott kereskedő végezheti.
- Az elhasznált, teljesen kiürült elemeket és akkukat a speciális jelölésekkel ellátott gyűjtőtályokba, a különleges hulladékot gyűjtőhelyekre vagy az

- Sarcina admisă a căntarului este de maxim 180 kg (396 lb / 28 st), divizare 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cărpă umedă, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curățare. Nu scufundați niciodată căntarul în apă. Nu spălați niciodată căntarul sub jet de apă.
- Feriți căntarul de socuri, umiditate, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură, câmpuri electromagnetice și surse de căldură prea apropriate.
- Nu vă urcați niciodată pe căntar pe marginea exterioară a căntarului: Pericol de cădere!
- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor!
- Aparatul este indicat pentru uz propriu și nu pentru uz medical sau comercial!
- În cazul în care aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați comerciantului sau serviciului pentru clienti.
- Înainte de a încanta o reclamație, verificați funcționarea bateriilor și înlăcuți-le dacă este nevoie.
- Reparațiile trebuie efectuate doar de personalul serviciului pentru clienti sau de comercianții autorizați.
- Bateriile și acumulatoarele uzate și complet golite se vor depune în recipiente colectoare special marcate, sau se vor colecta de către firmele specializate sau prin intermediul comerciantului de electrice. Sunteți obligați prin lege să duceți bateriile la punctele de colectare.
- Indicație: Bateriile care conțin substanțe poluanțe prezintă următoare simboluri: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmu, Hg = bateria conține mercur.
- Respectați prevederile locale privind eliminarea materialelor la deșeuri. Eliminati aparatul conform Regulamentului 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice

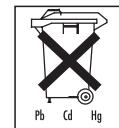

vechi. Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresați autorităților comunale competente în ceea ce privește deșeurile.

إرشادات عامة

- الحد الأقصى لقوة الحمل يبلغ 180 كجم (396 رطل) / 28 حجر)، التدرج 100 جرام (0.2 رطل/1 رطل)
- التنظيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قطعة قماش مبللة مع وضع بعض المنظفات عليها عند الحاجة. لا تقم أبداً بوضع الميزان في الماء، ولا تقم بشطفه أبداً تحت ماء جار.
- احرص على حماية الميزان من التعرض للصدمات والرطوبة والأتربة والغبار والمواد الكيميائية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة والمتغيرات المهرة ومتغيرات المغناطيسية وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة.
- لا تنسع أبداً من جانب واحد على الحافة الخارجية للميزان: خط الانقلاب!
- بعد الأطفال عن مواد التغليف.
- الميزان غير مخصص لاستخدام التجاري.
- إذا كانت لديك استفسارات حول استخدام الجهاز الخاص بنا، من فضلك توجه إلى الموزع الذي تتعامل معه أو إلى مركز خدمة العملاء.
- قم بفحص البطاريات قبل أي شكوى، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المتاجر المعتمدة.
- يجب التخلص من البطاريات المستهلكة أو الفارغة الشحنة تماماً عن طريق القائمة في حاويات مهملات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسليمهم لمستودعات تجميع القمامات الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية.

حيث أنك مطالب بالخلص من البطاريات بموجب القانون.



- ارشاد: تجد هذه العلامة على البطاريات المحتوية على مواد ضارة:
 - Pb = بطارية تحتوي على الرصاص،
 - Cd = بطارية تحتوي على الكadmيوم،
 - Hg = بطارية تحتوي على الزئبق.

- احرص على اتباع التعليمات والوائح المحلية عند التخلص من المواد. تخلص من الجهاز طبقاً لمواصفة WEEE 2002/96/EC - بخصوص (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أي استفسارات توجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.



